

Das Gynäkologie-Netz G-Mesh® besteht aus monofilem Polypropylengarn (transparent und blau) mit einer Faserdicke von 0,10 mm. Es wird zur chirurgischen Behandlung von Beckensenkung bei Frauen angewendet.

Blaue Orientierungslinien erleichtern die Sichtbarkeit und Positionierung des Produkts im Operationsfeld.

Die Enden jedes Arms sind speziell geformt und ermöglichen eine sichere Befestigung des Netzes im Ohr des Applikators, um das Implantat durch die anatomischen Strukturen und die Position im Körper der Patientin zu führen.


Jede Art des Netzes ist in einer Größe erhältlich – mit der Möglichkeit, dass der Chirurg während der Implantation geringfügige Maßanpassungen vornimmt, um sie an die individuelle Anatomie der Patientin anzupassen.

Typen:

- Posterior 2 (2-armiges Implantat)
- Anterior 4 (4-armiges Implantat)
- Posterior 6 (6-armiges Implantat)
- steril (sterilisiert mit Ethylenoxid)

Größen und Verpackung:

- Verpackt in eine Papier-Folie-Doppelverpackung und dann in Karton je 1 Stk.

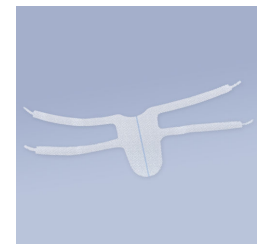

Die sterilen Medizinprodukte sind von der benannten Stelle PCBC SA zertifiziert und tragen die CE-Kennzeichnung mit der Nummer 1434

