

Schnell aushärtende Binde ist unersetzbar überall, wo eine sofortige Immobilisierung notwendig ist.

- besonders ausgewählte Gipskomposition auf Gaze der höchsten Qualität ermöglicht die Anlegung eines Dauerverbands mit harter Oberfläche
- speziell entwickelter Stamm mit Perforation lässt die Binde gleichmäßig und schnell nass werden
- universale Anwendung – optimale Bindezeit verursacht, dass dieser Bindetyp am meisten in Gipsräumen verwendet wird
- erhältlich auch in Longuetten-Form, eine 4-Schicht-Binde 10 oder 20 m lang, bestimmt zur Gestaltung von Gipsschalen und Abschnittsverstärkungen einer Gipsbinde
- Parameter: Einweichzeit ca. 5 Sekunden, Bindezeit 5 Minuten, Modellierungszeit ca. 3-3,5 Minuten
- Hohe Festigkeit und schnelle Bindezeit lässt eine Belastung schon nach 15-20 Minuten zu

Anwendung:

- grundsätzliche Immobilisierung der meisten typischen Frakturen
- Verformungskorrektur

Typen:

- Gipsbinden
- Longuetten

Größen und Verpackung:

- weiße Gipsbinden

2-Meter lang 6 cm breit

3-Meter lang: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 20 cm breit


4-Meter lang: 15 cm, 20 cm breit

verpackt je 2 Stk.

- Longuetten

20-Meter lang: 10 cm, 15 cm breit

verpackt je 1 Stk.

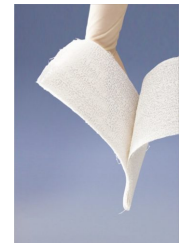

MD

>>